

FR	RÉFÉRENCE	
	PEPE - REHAUSSEUR TOILETTE AVEC ACCOUDOIR	P30012

Le **PEPE - REHAUSSEUR TOILETTE AVEC ACCOUDOIR** est parfait pour les personnes ayant des difficultés à se lever des toilettes, apportant sécurité et fermeté, pour les personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite. N'utilisez pas ce produit sans lire et comprendre les instructions. Si nécessaire, contactez d'abord un professionnel de la santé, un revendeur ou du personnel technique pour éviter d'éventuelles blessures. De plus, il s'adapte à la plupart des toilettes classiques ovales.

ASSEMBLÉE

La boîte contient: A. Siège de toilette surélevé avec couvercle, B. Supports à visser (2) et C. Accoudoirs.

Pour installer les accoudoirs:

- Placez chaque accoudoir dans les trous numérotés au bas du siège des toilettes. Les boutons métalliques doivent être tournés vers l'extérieur.
- Faites glisser le tube de l'accoudoir en position jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou avec son numéro correspondant et qu'un «clic» retentisse.
- Répétez le processus pour le reste des trous.
- Pour retirer les accoudoirs, appuyez sur le bouton métallique et tirez la poignée vers le haut.

Pour installer la colonne montante des toilettes:

- Placez la colonne montante des toilettes face vers le bas sur une surface plane et faites pivoter les supports dans les emplacements latéraux appropriés.
 - Serrez et tournez la poignée à vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les supports.
- Ne serrez pas complètement les supports, sinon il ne sera pas possible de positionner le siège.
- Soulevez le couvercle et placez la colonne montante des toilettes au-dessus des toilettes. Assurez-vous que le bord intérieur est placé à l'intérieur de la toilette et que le bord avant est placé à l'extérieur. La colonne montante des toilettes doit s'insérer dans les toilettes dans une position parfaitement plate.
 - Faites pivoter la tête des supports dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la colonne montante des toilettes soit sécurisée et immobile.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Toutes les pièces de la colonne montante des toilettes peuvent être nettoyées avec du savon et de l'eau chaude ou désinfectées avec des produits NON ABRASIFS.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Pour une utilisation correcte de l'appareil, consultez toujours votre médecin ou votre thérapeute.
- Assurez-vous que le produit est livré complet et gardez-le emballé à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Le siège de toilette surélevé ne doit pas être utilisé pour supporter plus de 100 kg.
- Les accoudoirs vous aident à monter et descendre du siège. Ne les utilisez pas pour supporter tout le poids du corps ou avec tout le poids sur un accoudoir en le tenant à deux mains ou l'appareil peut tomber en panne.
- Nous vous recommandons de n'utiliser qu'un seul utilisateur.
- Vérifiez les boulons une fois par mois et, si nécessaire, resserrez-les.
- L'appareil doit être désinfecté avant d'être réutilisé.
- NE laissez PAS les enfants jouer ou utiliser l'appareil.
- N'utilisez PAS la housse comme siège.
- N'utilisez l'élévateur de toilettes que dans le but pour lequel il a été conçu. La société n'est en aucun cas responsable de toute mauvaise utilisation de l'élévateur de toilettes, ou des blessures ou dommages causés en conséquence.
- Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et le patient sont établis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL		POIDS MAX. UTILISATEUR			
REHAUSSEUR	Polypropylène (PP)	100 kg			
ACCOUDOIRS	Aluminium				
		TAILLE	LONGUEUR	LARGEUR	MESURES INTERNES
REHAUSSEUR		10 cm	41 cm	36,5 cm	27,5 x 21,5 cm
ACCOUDOIRS		23 cm	49 cm	32 cm	42 x 26 cm

DE	REFERENZEN	
	PEPE - TOILETTENSITZERHÖHUNG MIT ARMLEHNEN	P30012

Der **PEPE - TOILETTENSITZERHÖHUNG MIT ARMLEHNEN** ist perfekt für Menschen mit Schwierigkeiten beim Aufstehen von der Toilette und bietet Sicherheit und Festigkeit für ältere Menschen, Behinderte oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne die Anweisungen gelesen und verstanden zu haben. Wenden Sie sich bei Bedarf zuerst an einen Arzt, Händler oder technisches Personal, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Darüber hinaus passt es auf die meisten klassischen ovalen Toiletten.

MONTAGE

Die Box enthält: A. Erhöhter Toilettensitz mit Bezug, B. Einschraubhalterungen (2) und C. Armlehnen.

So installieren Sie die Armlehnen:

- Setzen Sie jede Armlehne in die nummerierten Löcher im Boden des Toilettensitzes ein. Die Metallknöpfe sollten nach außen zeigen.
- Schieben Sie das Armlehnenrohr in Position, bis der Knopf mit der entsprechenden Nummer in das Loch einrastet und ein „Klicken“ ertönt.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Löcher.
- Um die Armlehnen zu entfernen, drücken Sie den Metallknopf und ziehen Sie den Griff nach oben.

So installieren Sie den Toilettensitz:

- Legen Sie den Toilettensitz mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche und drehen Sie die Halterungen in die entsprechenden Seitenpositionen.
 - Ziehen Sie den Schraubengriff fest und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Halterungen zu verriegeln.
- Ziehen Sie die Halterungen nicht fest an, da sonst der Sitz nicht positioniert werden kann.

- Heben Sie die Abdeckung an und platzieren Sie den Toilettensitz über der Toilette. Stellen Sie sicher, dass sich die Innenkante innerhalb der Toilette und die Vorderkante außerhalb befindet. Der Toilettensitz sollte in einer perfekten flachen Position in die Toilette passen.
- Drehen Sie den Kopf der Halterungen im Uhrzeigersinn, bis der Toilettensitz sicher und unbeweglich ist.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Alle Teile des Toilettensitzes können mit Seife und heißem Wasser gereinigt oder mit NICHT-SCHLEIFMITTELN desinfiziert werden.


ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Für eine korrekte Verwendung des Geräts wenden Sie sich immer an Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geliefert wird, und halten Sie es von Wärmequellen fern. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Der erhöhte Toilettensitz darf nicht zur Unterstützung von mehr als 100 kg verwendet werden.
- Die Armlehnen erleichtern das Auf- und Absteigen. Verwenden Sie sie nicht, um das volle Gewicht des Körpers zu tragen oder das gesamte Gewicht auf einer Armlehne mit beiden Händen zu halten, da das Gerät sonst ausfallen kann.
- Wir empfehlen, nur einen Benutzer zu verwenden.
- Überprüfen Sie die Schrauben monatlich und ziehen Sie sie gegebenenfalls wieder fest.
- Das Gerät muss vor der Wiederverwendung desinfiziert werden.
- Lassen Sie Kinder das Gerät NICHT spielen oder bedienen.
- Verwenden Sie den Toilettensitz nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Das Unternehmen haftet in keiner Weise für den Missbrauch des Toilettensitzes oder für dadurch verursachte Verletzungen oder Schäden.
- Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und der Patient ansässig sind, gemeldet werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MATERIAL		MAX. NUTZERGEWICHT			
TOILETTENSTEIG	Polypropylen (PP)	100 kg			
ARMLEHNEN	Aluminium				
		HÖHE	LÄNGE	BREITE	INNENMASSNAHMEN
TOILETTENSTEIG		10 cm	41 cm	36,5 cm	27,5 x 21,5 cm
ARMLEHNEN		23 cm	49 cm	32 cm	42 x 26 cm

HANDLE ASSEMBLY / MONTAJE ASAS / MONTAGGIO BRACIOLE / ASSEMBLÉ ACCOUDOIRS / MONTAGE ARMLEHNEN

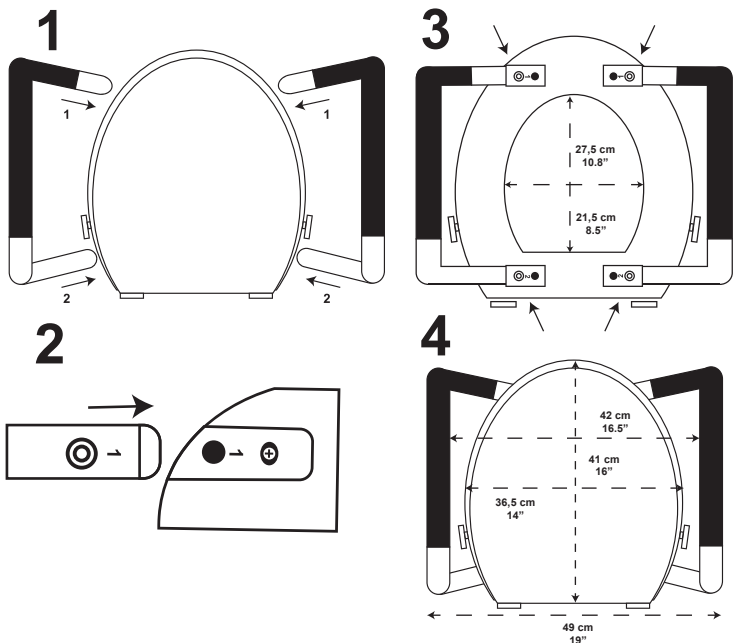

RISER ASSEMBLY / MONTAJE ELEVADOR / MONTAGGIO RIALZO / ASSEMBLÉ REHAUSSEUR / MONTAGE TOILETTENSTEIG

